


# Tabea's

## Rezepturtipps




*Waagen- / Wäagemanagement*

# Auswahl der Waage

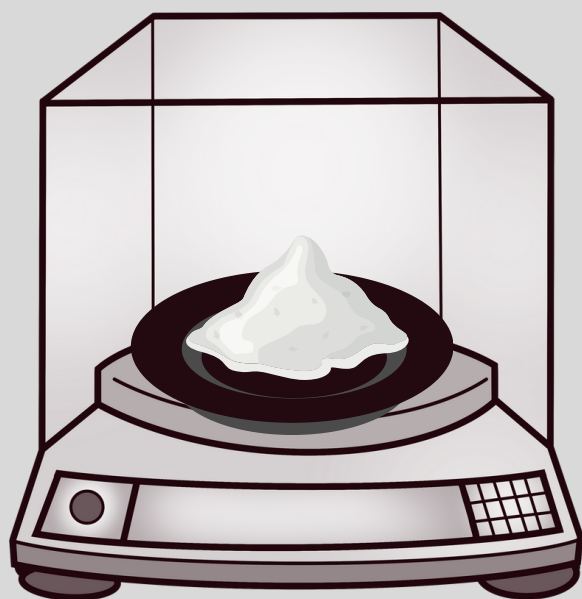

**Fein-/  
Analysenwaage**  
bis 1,0000g

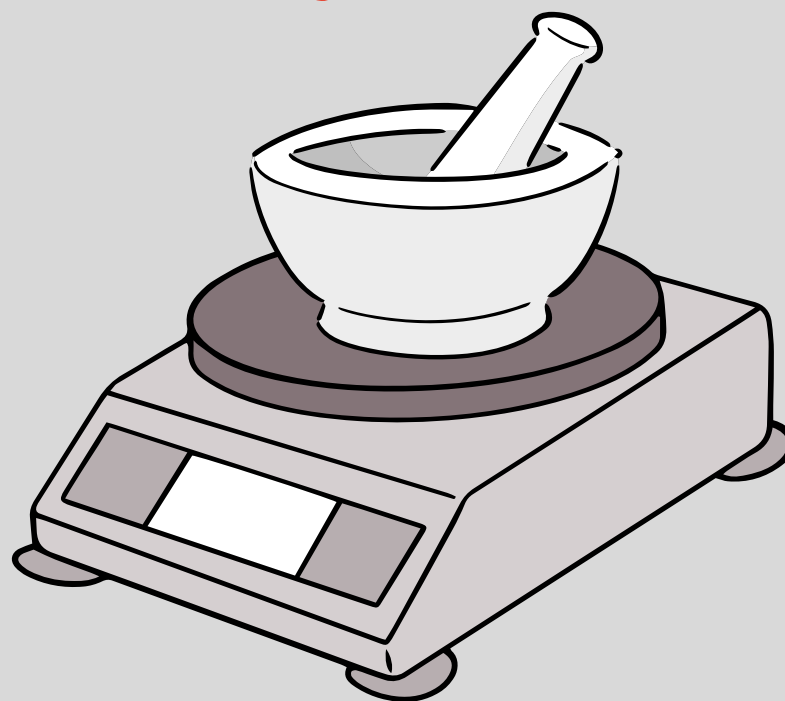

**Präzession-/  
Rezepturwaage**  
über 1,00g

# Korrektes Waagenmanagement:


*Dokumentiert!*

## Kalibrierung-

Funktionsprüfung mit externen Prüfgewichten durchgeführt und Intervall festgelegt? (*wöchentlich - halbjährlich durchführen*)

**Mindesteinwaage-/Last** bestimmt nach DAC/NRF 1.2.9.3.? (*einmal durchführen*)

**Geeicht?** (*alle 2 Jahre erneuern*)

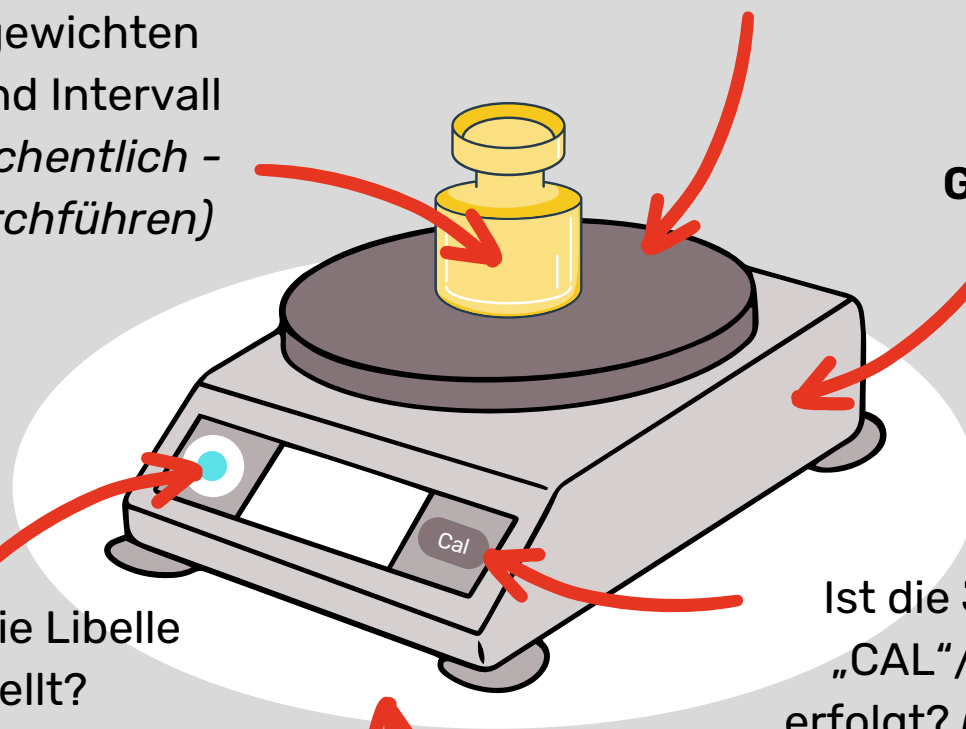

**Nivellierung** -Ist die Libelle richtig eingestellt? (*täglich durchführen*)

Ist die **Justierung** mit der „CAL“/„IsoCAL“-Funktion erfolgt? (*täglich durchführen*)

**Nivellierung** -Steht die Waage stabil? (*täglich durchführen*)

# Korrektes Wägenmanagement:

*Dokumentiert!*

